

CONFEZIONE PER AUTO-PRELIEVO PER HPV


Questa confezione contiene il materiale necessario per il prelievo di un campione in autonomia.

Informazioni importanti


- Leggere le presenti istruzioni attentamente e completamente prima di procedere con il prelievo del campione.
- Seguendo le istruzioni alla lettera, non si dovrebbe avvertire dolore e il disagio dovrebbe essere minimo.
- Non si deve procedere al prelievo di campioni durante le mestruazioni (il ciclo), in gravidanza, nei tre mesi successivi al parto, dopo recenti interventi ginecologici o in caso di sanguinamento insolito o dolore pelvico.
- Non si deve procedere al prelievo di campioni se, nei 3 giorni precedenti, si sono utilizzati ovuli, creme o lavande vaginali, contraccettivi vaginali o preservativi.
- Non si deve procedere al prelievo di campioni se, nei 2 giorni precedenti, si sono avuti rapporti sessuali o si sono effettuate ecografie o visite ginecologiche.
- In caso di problemi, malessere o vertigini, interrompere il prelievo e consultare il personale sanitario di riferimento.
- Il tampone non contiene materiale di origine animale.

Contenuto della confezione per campioni

Verificare che la confezione contenga tutti gli articoli elencati di seguito. Non procedere con il prelievo del campione se uno o più degli articoli è assente o danneggiato; richiedere assistenza al personale sanitario.

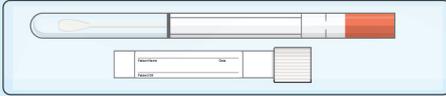

Tampone vaginale e provetta per il prelievo

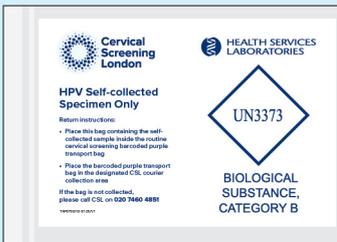

Busta per la restituzione del campione


Summary
First name
Date of birth
Sample date
Sample Vaginal SC Swab

Etichetta per il campione

ISTRUZIONI PER LA PAZIENTE – CAMPIONE CON TAMPONE

1 Lavare le mani in acqua calda saponata. Aprire la confezione contenente la provetta con il tampone e quella per il prelievo. Rimuovere il tappo dalla provetta per il prelievo e mettere da parte.


2 È importante mantenere una posizione confortevole durante il prelievo del campione. È possibile prelevare il campione in posizione eretta. Ruotare il tappo della provetta con il tampone per rompere il sigillo prima di prelevare il campione.

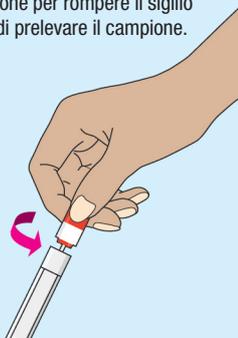


3 Estrarre il tampone dalla provetta e afferrarlo in corrispondenza della linea rossa al centro del bastoncino per prelevare il campione. **Non afferrare il tampone dall'estremità del tappo rosso.**




Non lasciare che la punta bianca del tampone venga in contatto con alcuna superficie durante il prelievo del campione. Se il tampone viene a contatto con una superficie in qualsiasi momento, richiedere un'altra confezione.

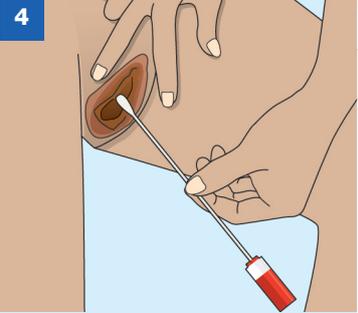

4 Tenere il tampone dritto sia durante il suo inserimento nella vagina sia durante la sua rimozione. Con l'altra mano, allargare delicatamente la pelle all'esterno della vagina. Inserire la punta del tampone nell'apertura della vagina. Orientare la punta verso la parte bassa della schiena e rilassare i muscoli.

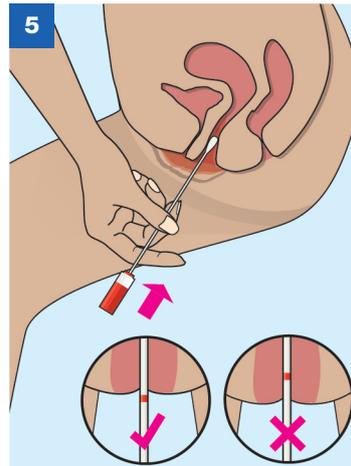

5 Inserire il tampone nella vagina come indicato. Se il tampone non scivola facilmente, farlo ruotare delicatamente durante l'inserimento. Le dita posizionate sulla linea rossa impediranno un inserimento in profondità. Se si riscontrano difficoltà, non continuare.

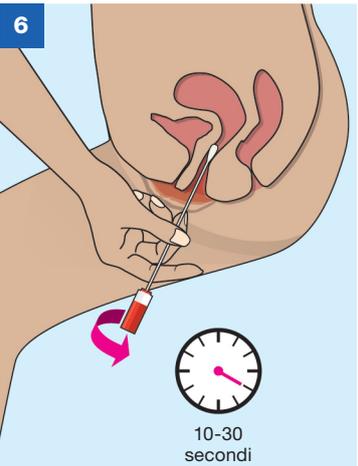


6 Ruotare il tampone per 10-30 secondi, assicurandosi di toccare le pareti della vagina; rimuovere poi il tampone, prestando attenzione.

7 Inserire il tampone nella provetta per il prelievo, prestando attenzione.

Mantenendo ben ferma la provetta, spezzare il bastoncino all'altezza della linea rossa. Gettare l'estremità rimossa del bastoncino, lasciando all'interno della provetta l'estremità rivestita di cotone.



8 Riavvitare fermamente il tappo sulla provetta per il prelievo.

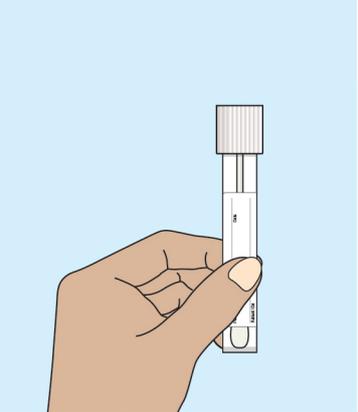

Ora è possibile consegnare il tampone al personale sanitario. Completerà la procedura necessaria prima di inviare il campione per le analisi del caso. Consegnare la provetta per il prelievo, la busta trasparente, l'etichetta del campione e questo foglio di istruzioni al personale sanitario.



Per visualizzare queste istruzioni in altre lingue, consultare: www.hslpathology.com/cervical-screening-self-collection

© The Doctors Laboratory Limited, 2025.
Illustrazioni: © Jag Matharu/Thin Air Productions
TAP5692B-ITALIAN/30-07-25/V8