

KIT D'AUTO-PRÉLÈVEMENT HPV


Ce kit contient le nécessaire pour réaliser un auto-prélèvement.

Informations importantes


- Veuillez lire attentivement cette notice dans son intégralité avant de procéder au prélèvement.
- Si vous suivez bien les instructions données, vous ne devriez ressentir qu'un minimum d'inconfort et aucune douleur.
- N'effectuez pas le prélèvement dans les circonstances suivantes: pendant la période des règles, pendant la grossesse, dans les trois mois suivant un accouchement, peu de temps après une intervention gynécologique, ou en cas de saignements inhabituels ou de douleur pelvienne.
- N'effectuez pas le prélèvement si, dans les 3 jours qui précèdent, vous avez utilisé des ovules, des crèmes ou douches vaginales, des contraceptifs ou préservatifs vaginaux.
- N'effectuez pas le prélèvement si, dans les 2 jours qui précèdent, vous avez eu des rapports sexuels, passé une échographie ou subi un examen gynécologique.
- En cas de gêne, malaise ou étourdissements, arrêtez-vous et consultez un professionnel de santé.
- L'écouvillon ne contient aucune matière d'origine animale.

Contenu du kit

Veuillez vérifier que le kit contient bien tous les articles décrits ci-dessous. En cas de pièce manquante ou endommagée, ne réalisez pas le prélèvement. Contactez votre professionnel de la santé pour obtenir de l'aide.

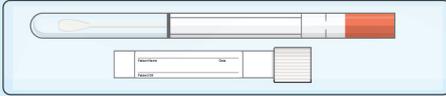

Un écouvillon vaginal et un tube de prélèvement

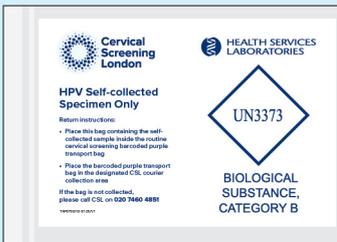

Un sachet pour le retour de l'échantillon


Summary
First name
Date of birth
Sample date
Sample Vaginal SC Swab

Une étiquette d'échantillon

NOTICE À L'INTENTION DU PATIENT – PRÉLÈVEMENT DE L'ÉCHANTILLON


1 Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon. Ouvrez le kit qui contient l'écouvillon et le tube.

Retirez le capuchon du tube et mettez-le de côté.

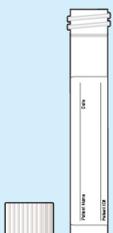


2 Il est important de garder une position confortable lors du prélèvement de l'échantillon. Le prélèvement peut se faire debout.

Tournez le capuchon du tube de l'écouvillon pour rompre le joint avant de prélever votre échantillon.

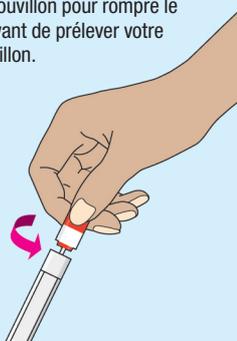


3 Sortez l'écouvillon du tube et tenez-le entre vos doigts à la marque rouge au milieu de la tige pour prélever votre échantillon. **Ne le tenez pas par l'embout rouge.**


Faites attention à ce que la pointe blanche de l'écouvillon ne touche pas la moindre surface pendant le prélèvement de l'échantillon. Si c'est le cas, veuillez vous procurer un nouveau kit.

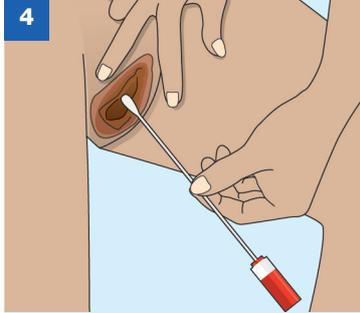

Tenez l'écouvillon bien à la verticale lors de son introduction dans le vagin et lors de son retrait. De l'autre main, écartez délicatement la peau autour du vagin. Insérez la pointe de l'écouvillon dans l'ouverture du vagin. Insérez la pointe en la dirigeant vers le bas du dos. Détendez-vous.

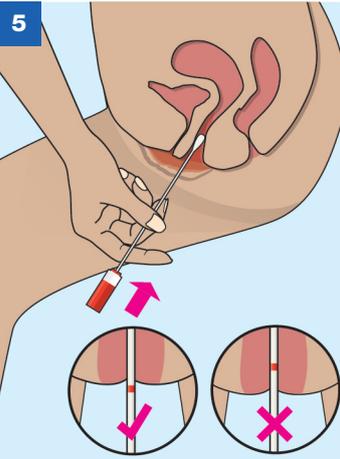


Insérez la pointe l'écouvillon dans votre vagin comme indiqué sur l'illustration. Si l'écouvillon ne glisse pas facilement, faites-le tourner délicatement sur lui-même à mesure que vous l'enfoncez. Le fait d'avoir placé vos doigts sur la ligne rouge vous empêchera de l'introduire trop loin. Si c'est trop difficile, arrêtez.

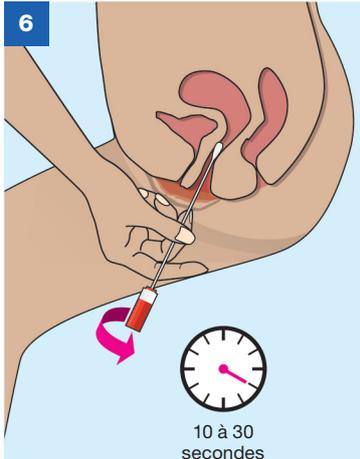


Tournez l'écouvillon sur lui-même pendant 10 à 30 secondes, en le maintenant contre les parois vaginales, puis retirez-le délicatement.

7 Placez l'écouvillon soigneusement dans le tube.

En tenant le tube fermement, brisez la tige au niveau de la ligne rouge. Jetez l'extrémité tige de l'écouvillon et gardez l'extrémité coton.

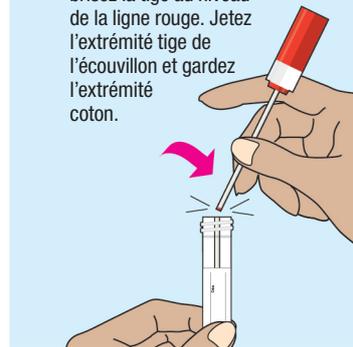

8 Revissez bien le capuchon sur le tube.

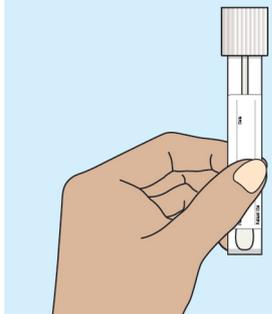

Vous pouvez maintenant remettre l'écouvillon à votre professionnel de la santé. Il soumettra votre échantillon à la procédure requise avant de l'envoyer au laboratoire.

Remettez à votre professionnel de la santé le tube contenant l'écouvillon, le sachet d'échantillon transparent, l'étiquette de l'échantillon et cette notice d'instructions.



Pour consulter ces instructions dans d'autres langues, veuillez visiter:
www.hslpathology.com/cervical-screening-self-collection

© The Doctors Laboratory Limited, 2025.
Illustrations: © Jag Matharu/Thin Air Productions
TAP5692B-FRENCH/30-07-25/V8