

HPV自检包

自检包带有自行采样所需的全部材料。

重要事项


- 在采样前，请仔细阅读说明书全文。
- 严格遵循说明进行操作只会产生轻微不适，不会有疼痛感。
- 若有以下情况请勿采样：处于月经期、妊娠期、产后三个月内、近期接受过妇科手术，或存在异常出血、盆腔疼痛症状。
- 采样前3天内若使用了阴道栓剂、乳膏、冲洗剂、阴道避孕药或避孕套，请勿采样。
- 采样前2天内若有过性生活、超声检查或妇科检查，请勿采样。
- 若操作中遇到问题，或感到不适、头晕，请立即暂停并咨询医护人员。
- 拭子不含动物源性材料。

自检包内容物

请检查包装内的以下物品是否齐全。
若有缺失或损坏，请勿采样并联系医护人员处理。



阴道拭子和采集管

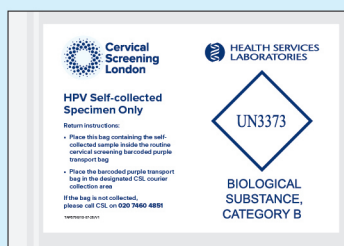

样本回寄袋

Summary
First name
Date of birth
Sample date
Sample Region: SE South



样本标签

患者须知：拭子采样步骤


- 用肥皂温水洗手。打开装有拭子和采集管的自检包。
取下采集管的盖子，放在一旁。

- 采样时，请保持舒适且平稳的姿势。
可采取站姿采样。
采样前，拧开拭子管的盖子，打开密封。


- 从管中取出拭子，手指捏住拭子杆中间红色标记处进行采样。请勿握住红色端盖。
采样过程中，白色拭子头不可接触其他物体。
若拭子不慎接触其他物体，请领取新的自检包。

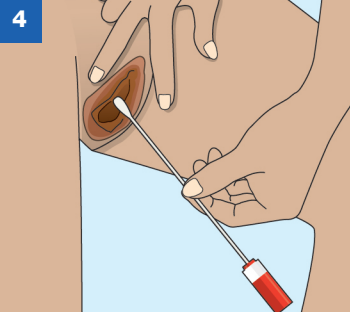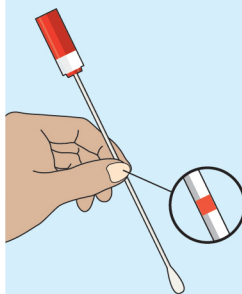

将拭子插入或取出阴道时，保持拭子竖直。另一只手轻轻分开阴道口周围的皮肤。将拭子尖端插入阴道口。将尖端朝向自己的下背部方向，同时放松肌肉。

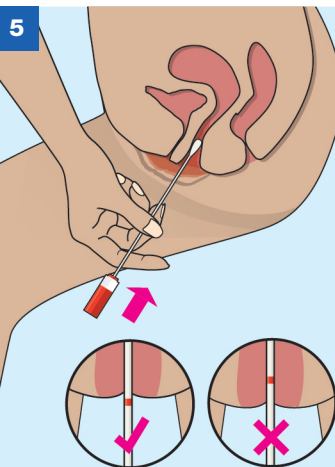


按图示将拭子插入阴道。若拭子不易滑入，插入时可轻轻旋转。手指握住红色标记处，防止插入过深。若操作不便，请勿强行插入。

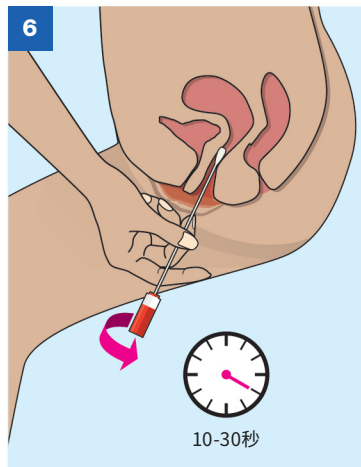


旋转拭子10-30秒，确保接触阴道壁，然后小心取出拭子。

- 将拭子小心放入采集管。
稳住采集管，在红色标记处将拭子杆折断。丢弃拭子杆尾端，仅保留棉头。

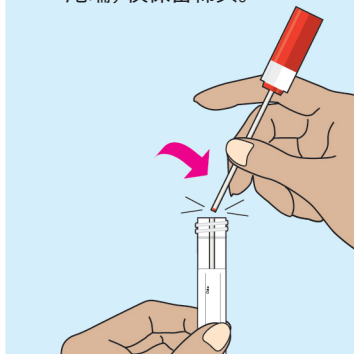

- 将采集管的盖子拧紧。

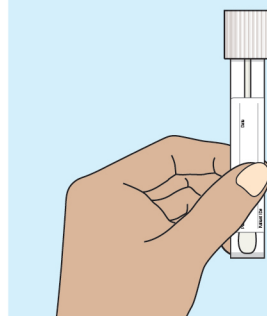

此时，可将拭子交还医护人员。医护人员会对样本进行处理，然后送去检测。
将拭子采集管、透明样本袋、样本标签及本说明书交给医护人员。



如需查看其他语言的说明，请访问：
www.hslpathology.com/cervical-screening-self-collection

© The Doctors Laboratory Limited, 2025.
插图：© Jag Matharu/Thin Air Productions
TAP5692B-CHINESE-CN/05-08-25/V8